



CON PIN ESTÁNDAR



SIN PIN ESTÁNDAR

Nivel de Actividad:



ENCAJE TIBIAL LITE LINER GEL SUPREME

Referencia 4W9010/ 4W9510

- Encaje para amputaciones tibiales con muñones normales o sensibles con buena o baja cobertura de tejidos blandos.
- Perfil de gel uniforme para muñones normales.
- Perfil de gel en cono para muñones cónicos.

CARACTERÍSTICAS


- Disponible con o sin conector distal.
- Refuerzo Matrix de 10 cm para absorción de impactos.
- Longitud de 410 mm aproximadamente.
- Grosor posterior más estrecho en encajes con grosor de gel de 6 mm.
- También disponible en color carne o azul bajo pedido a proveedor.

CON PIN ESTÁNDAR

TALLA	GROSOR CAPA DE GEL		
	Uniforme 3 mm	Uniforme 6 mm	Cónico 3 mm
S	4W9010-03-S-G*	4W9010-06-S-G*	4W9010-T3-S-G
IS	4W9010-03-IS-G*	4W9010-06-IS-G*	4W9010-T3-IS-G
M	4W9010-03-M-G*	4W9010-06-M-G*	4W9010-T3-M-G
L	4W9010-03-L-G*	4W9010-06-L-G*	4W9010-T3-L-G
IL	4W9010-03-IL-G*	4W9010-06-IL-G*	4W9010-T3-IL-G
XL	4W9010-03-XL-G*	4W9010-06-XL-G*	4W9010-T3-XL-G
XLP	4W9010-03-XLP-G	4W9010-06-XLP-G	4W9010-T3-XLP-G
XXL	4W9010-03-XXL-G	4W9010-06-XXL-G	4W9010-T3-XXL-G

SIN PIN ESTÁNDAR

TALLA	GROSOR CAPA DE GEL		
	Uniforme 3 mm	Uniforme 6 mm	Cónico 3mm
S	4W9510-03-S-G	4W9510-06-S-G*	4W9510-T3-S-G
IS	4W9510-03-IS-G	4W9510-06-IS-G*	4W9510-T3-IS-G
M	4W9510-03-M-G	4W9510-06-M-G*	4W9510-T3-M-G
L	4W9510-03-L-G	4W9510-06-L-G*	4W9510-T3-L-G
IL	4W9510-03-IL-G	4W9510-06-IL-G*	4W9510-T3-IL-G
XL	4W9510-03-XL-G	4W9510-06-XL-G	4W9510-T3-XL-G
XLP	4W9510-03-XLP-G	4W9510-06-XLP-G	4W9510-T3-XLP-G
XXL	4W9510-03-XXL-G	4W9510-06-XXL-G	4W9510-T3-XXL-G

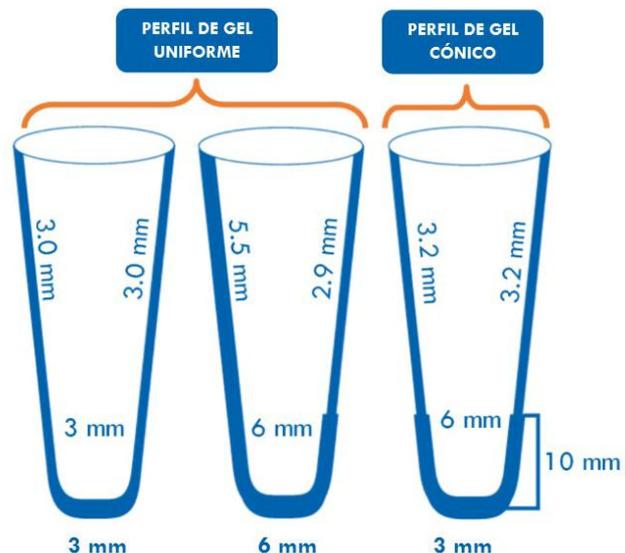


## LITE Liner Gel

Todos los LITE LINER GEL están confeccionados en Gel Elastómero Termoplástico Biocompatible (TPE). Este tipo de gel minimiza las cargas y presiones, ofreciendo confort para todo tipo de muñones, incluyendo aquellos especialmente sensibles, de carácter atípico ya sea por prominencias óseas o depresiones y hendiduras por cicatriz.

Para casos especiales LITE LINER GEL puede ser termoplásticamente remodelado a una temperatura de 80°C.

LITE LINER GEL ha sido sometido a los test de biocompatibilidad DIN EN ISO 10993-5 y 19993-10.

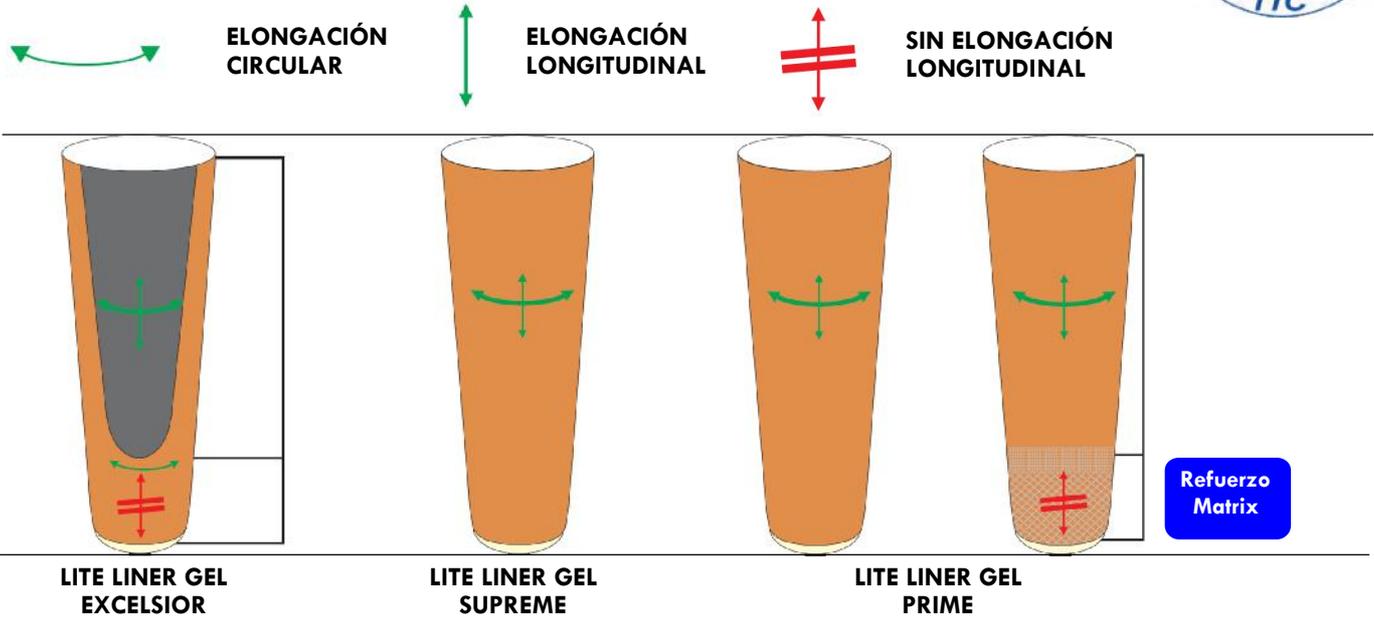

## TABLA DE MEDIDAS PARA TALLAS LINERS DE GEL:

	S	IS	M	L
40 cm	22-35 cm	23-37 cm	27-43 cm	37-59 cm
30 cm	20-32 cm	21-34 cm	25-40 cm	32-51 cm
20 cm	18-28 cm	19-30 cm	24-38 cm 22-36 cm (Ajustado)	28-45 cm 26-43 cm (Ajustado)
10 cm	16-25 cm	18-29 cm	22-35 cm 20-33 cm (Ajustado)	25-40 cm 23-38 cm (Ajustado)
4 cm	15-22 cm	16-25 cm	20-32 cm 18-30 cm (Ajustado)	21-33 cm 19-31 cm (Ajustado)

	IL	XL	XLP	XXL
40 cm	40-64 cm	42-68 cm	44-71 cm	49-80 cm
30 cm	36-58 cm	40-64 cm	41-66 cm	47-76 cm
20 cm	34-54 cm 32-52 cm (Ajustado)	38-61 cm	39-63 cm	44-71 cm
10 cm	30-48 cm 28-46 cm (Ajustado)	34-55 cm	35-56 cm	39-65 cm
4 cm	26-41 cm 24-39 cm (Ajustado)	27-43 cm	30-50 cm	34-60 cm