




COLCHÓN ANTIESCARAS GRADO II CON COMPRESOR

Referencia

ECO-18-2

Colchón antiescaras diseñado para el tratamiento y prevención de úlceras presión de categoría II. Fabricado en resistente PVC de grado médico, dispone de un grosor de 9,5 cm, con 20 células que a través de un ciclo de carga alterno, proporcionan un óptimo confort. Con una disposición intercambiable de células de soporte para facilitar su sustitución, también dispone de diseño deslizable en la zona perineal para facilitar el alivio de deposiciones y orina.

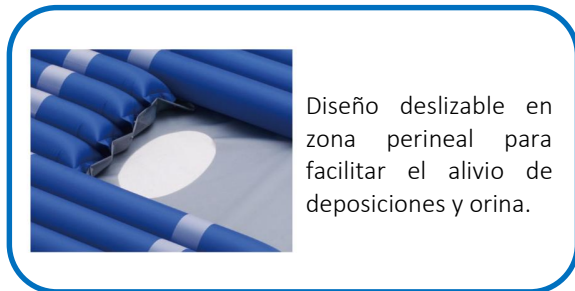

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema intercambiable de células de soporte.
- Mayor eficiencia en la distribución de la presión.
- Resistente PVC de grado médico.
- Óptimo confort.
- Compresor de diseño compacto, ultrasilencioso, de máxima fiabilidad y seguridad.

CARACTERÍSTICAS DEL COLCHÓN

Dimensiones	200x86x9,5 cm
Material	PVC de Grado Médico
Número de células	20
Resistencia al peso	140 kg
Certificados	RoHS/ EN-71/ CA-117
Peso	4,5 kg
Garantía	12 meses

CARACTERÍSTICAS DEL COMPRESOR

Especificaciones eléctricas	AC 220V/50Hz, 0.1 A
Rango de presión	40-70 mmHg
Dimensiones	25x12x10 cm
Salida de aire	6-7 L/min
Peso	1,4 kg
Ciclo de tiempo	12 min